

ADMINISTRACIÓN IV UTILIZANDO BOMBA ELASTOMÉRICA

Vea el video instructivo haciendo clic en el enlace a continuación.

<https://www.landmarkinfusion.com/elastomeric-pump-administration-video>

EMPEZANDO

- Retire el medicamento del refrigerador unas horas antes de usarlo para asegurarse de que su medicamento esté a temperatura ambiente. NUNCA acelere el proceso de calentamiento calentando el medicamento.
- Use un área de trabajo limpia.
- Límpiense bien las manos.



REÚNE TUS SUMINISTROS

- Guía de alfombrilla SASH
- Bola de medicación
- Jeringas de lavado: solución salina (tapa blanca), heparina (tapa amarilla o azul)
- Tapón de hisopo naranja
- Toallitas de alcohol
- Contenedor de basura

INSPECCIONE LA BOLA DE MEDICACIÓN

- Verifique la etiqueta en la bola de medicación.
- Verificar Nombre correcto del paciente, nombre correcto del medicamento.
- Revise la fecha de descarte del medicamento.
- El balón de medicación debe estar libre de grietas o fugas. Llame a la farmacia tocante problemas con la bola del medicamento o información incorrecta en la etiqueta.

INFUSIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO SASH COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

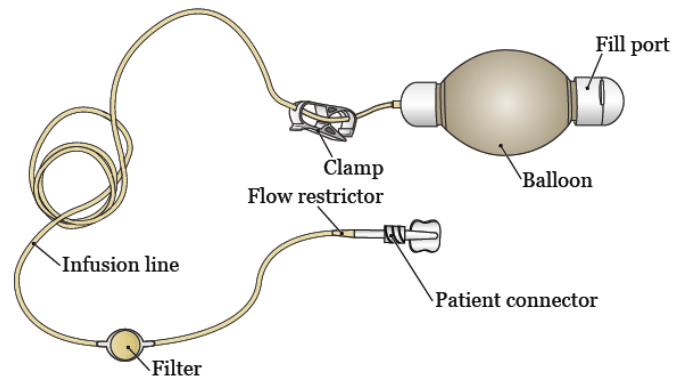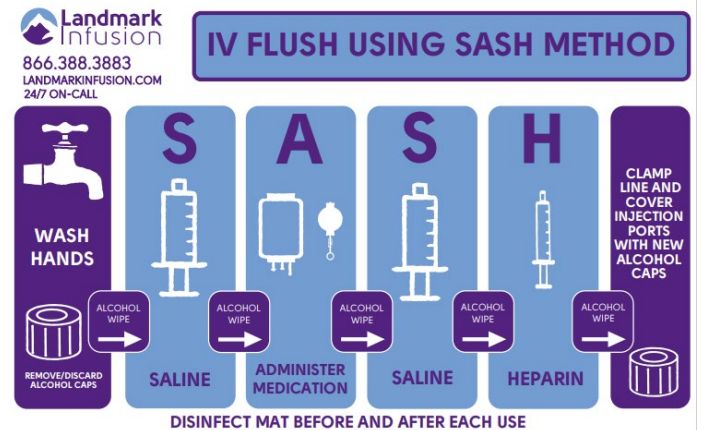

1. Enjuague su línea IV con solución salina (S)

- Si corresponde, suelte la abrazadera de su catéter intravenoso y/o extensión.
- Retire la tapa de alcohol del extremo de su catéter intravenoso.
- Frote el conector sin aguja de su catéter intravenoso con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y déjelo secar al aire.
- Retire la tapa protectora de la jeringa de lavado con solución salina. NO toque la punta de la jeringa después de quitar la tapa. Saque el aire y algunas gotas del exceso de solución sujetando la jeringa con la punta hacia el techo y empujando el émbolo hacia arriba.
- Conecte la jeringa de lavado con solución salina al conector sin aguja de su catéter intravenoso empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien sujeto.
- Enjuague su catéter intravenoso usando un método de "empuje/pausa".
- Retire y deseche la jeringa de lavado con solución salina en un contenedor de basura.
- Si se encuentra resistencia al intentar descargar, verifique que la abrazadera esté abierta. Si aún encuentra resistencia, llame a su enfermera.



2. Administrar Medicamentos (A)

- Frote el conector sin aguja de su catéter intravenoso con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y déjelo secar al aire.
- Retire la tapa protectora del tubo del medicamento.
- Conecte firmemente el tubo del medicamento al conector sin aguja de su catéter intravenoso empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien sujeto.
- Abra la abrazadera del tubo del medicamento. Verifique la etiqueta del medicamento para ver cuánto durará el medicamento.
- Cuando la bola de medicación esté completamente desinflada, cierre la abrazadera del tubo de medicación y desconéctelo del catéter intravenoso y deseche la bola de medicación en un contenedor de basura.
- Si después de 30 minutos no ve que el dispositivo se desinfla, vuelva a verificar para asegurarse de que todas las abrazaderas estén abiertas. Si esto no tiene éxito, comuníquese con su enfermera.



3. Enjuague su línea IV con solución salina (S)

- Siga el paso 1 anterior comenzando en el tercer punto.

4. Enjuague su vía con heparina (H)

- Siga el paso 1 anterior comenzando en el tercer punto, usando heparina en lugar de solución salina.
- Coloque la tapa del hisopo naranja si se indica.
- Cierre la abrazadera de su catéter IV y/o conjunto de extensión IV, si está indicado.

****SI TIENE DOS PUERTOS EN SU CATÉTER IV...***

- *Asegúrese de enjuagar cada puerto al menos una vez al día.*
 - *OPCIÓN 1: Si tiene múltiples dosis de medicamento por día, puede usar un puerto para su primera dosis y usar el otro puerto para dosis posteriores.*
 - *OPCIÓN 2: Complete la parte (SH) del procedimiento (SASH) en el puerto del catéter intravenoso no utilizado mediante lavado con solución salina y luego con heparina como se indicó anteriormente.*

*****SI PLANEA INFUSIONAR DOS MEDICAMENTOS JUNTOS...***

- *Asegúrese de enjuagar con solución salina entre cada medicamento y finalice la infusión con un enjuague con heparina.*
 - *Use el procedimiento (SASASH) como se indicó anteriormente, enjuague la línea con solución salina, administre el medicamento n.º 1, lave la línea con solución salina, administre el medicamento n.º 2, lave la línea con solución salina y luego lave la línea con heparina.*

******SI SU MEDICACIÓN ES CONTINUA...***

- *No necesita enjuagar con heparina, solo necesita enjuagar con una jeringa de solución salina entre cada balón medicinal.*
 - *En lugar de (SASH), seguirías a (SASAS...).*